


# AO SEPT<sup>TM</sup>

PLUS

with  
**HydraGlyde<sup>TM</sup>**  
MOISTURE MATRIX

# Alcon

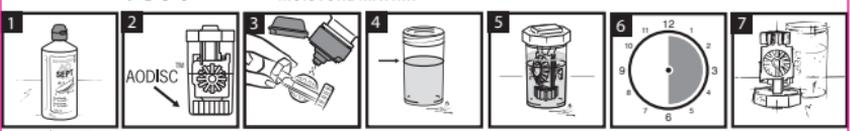

**DÖLÉZETI INFORMÁCIÓK A HASZNÁLATI ELŐZMÉNYSZÖRŐK ÉS A SZEMERŐK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ, VALAMINT BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZ. KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG, HOGY SZÜKSÉG ESETÉN A JÖVŐBEN IS HASZNÁLNI TUDJA! A NEM MEGFELELŐ LENCSÉPVÁLTÁS SÜLYÖS SZEMÉSZETI PROBLÉMÁKAT EREDMÉNYEZHET.**

**NÁVEZ YIKROBUK:**  
AOSEPT<sup>TM</sup> PLUS

3% peroxid vodúku  
Čistící a dezinfekční roztok  
s HydraGlyde<sup>TM</sup> Moisture Matrix

Pro měkké (hydrofilní) kontaktní čočky a tvrdé plynopropustné (fluorosilikonakrylátové a silikonakrylátové) čočky.

**POPIS:**

Systém péče o kontaktní čočky AOSEPT<sup>TM</sup> PLUS s HydraGlyde<sup>TM</sup> Moisture Matrix sestává ze: čistícího a dezinfekčního roztoku AOSEPT<sup>TM</sup> PLUS s HydraGlyde<sup>TM</sup> Moisture Matrix (viz obrázek 1.) a pouzdra na kontaktní čočky AOcup (viz obrázek 2.). Pouzdro na kontaktní čočky AOcup tvoří transparentní nádobka s připevněnou jednotkou složenou ze šroubovacího uzávěru, držáku čoček (košíčky) a neutralizačního katalyzátoru AODISC<sup>TM</sup>, případně ochrannou na spodní části. Před použitím se ujistěte, zda je katalyzátor AODISC<sup>TM</sup> nasazený v systému, protože je nezbytné k neutralizaci peroxidu vodíku. Roztok AOSEPT<sup>TM</sup> PLUS s HydraGlyde<sup>TM</sup> je možné používat pouze společně s pouzdem na kontaktní čočky AOcup.  
Někdy roztok AOSEPT<sup>TM</sup> PLUS s HydraGlyde<sup>TM</sup> Moisture Matrix bez konzervačních látek obsahuje: nejméně 3% lysylinu fosfonovou (stabilizátor), chlorid sodný, fosforečnan (pufrovací systém), polysámer (povrchově aktivní činidlo) a Moisture Matrix (EO80-21TM – polyoxyethylén-polyoxybutylén).

**NÁVOD K POUŽITÍ:**

**NIKDY** nenamážete roztok AOSEPT<sup>TM</sup> PLUS s HydraGlyde<sup>TM</sup> do oka ANI na kontaktní čočku bezprostředně před nasazením do oka. Pokud tak učiníte, způsobí pálení a svědění.

1. Umyjte si ruce a osušte je čistým ručníkem nepoužijícím vlákná. 2. Otevřete držák čoček označený „L“, vyjměte si levou kontaktní čočku a umístěte ji na vykládací část. Zavřete držák čoček a dřívete pozor, abyste kontaktní čočku nepřiskřípli.

3. Stejným způsobem umístěte pravou kontaktní čočku na vykládací druhého držáku čoček označený „R“.

4. Otevřete odklápací víčko láhve s roztokem AOSEPT<sup>TM</sup> PLUS s HydraGlyde<sup>TM</sup> a odklopte jej na stranu.

5. Důkladně opláchněte čočky umístěné v držáku čoček roztokem AOSEPT<sup>TM</sup> PLUS s HydraGlyde<sup>TM</sup> po dobu 5 sekund (viz obrázek 3).

6. Naplněte nádobku pouzdra roztokem AOSEPT<sup>TM</sup> PLUS s HydraGlyde<sup>TM</sup> přesně po plnicí rysku. **NEPŘEPLŇUJTE ANI NEPLŇTE NEDOSTATEČNĚ** (viz obrázek 4).

7. Vložte držák s čočkami do nádobky zašroubovaním pouzdra uzavřete. Pouzdro na čočky AOcup neutahujte příliš (utahujete pouze prsty). **POUŽÍTE S ČOČKAMI NEPROTŘEPÁVĚTE.**

8. Pouzdro s čočkami uchovávejte postavené ve svislé poloze (viz obrázek 5).  
- Pokud se z otvoru víčka pouzdra uvolní bublinky, může být přítomen neneutralizovaný roztok AOSEPT<sup>TM</sup> PLUS s HydraGlyde<sup>TM</sup>. Vylijte roztok z pouzdra na čočky a smyčte veškeré rozdílné zbytky z plochy, na které AOcup stál. Nádobku a držák čoček důkladně opláchněte sterilním fyziologickým roztokem. V případě rozdílné kapalinu hned setřete papírovou utěrkou. Než začnete manipulovat s čočkami nebo se dotýkat očí, důkladně si umyjte ruce. **OPAKUJTE VÝŠE POPISANÝ POSTUP DEZINFEKCE.**

9. Nechte čočky nejméně 6 hodin nebo přes noc namočené (viz obrázek 6), aby došlo k neutralizaci roztoku.

10. Po umytí, opláchnutí a osušení rukou vyjměte kontaktní čočky z držáku čoček.  
11. Podle vlastního přání nebo doporučení očního specialisty. Kontaktní čočky pro neutralizaci před nasazením do oka opláchněte **STERILNÍM FYZIOLOGICKÝM ROZTOKEM**. Roztok AOSEPT<sup>TM</sup> PLUS s HydraGlyde<sup>TM</sup> nepoužívejte k opláchnutí kontaktních čoček před nasazením do oka.

12. Vaše kontaktní čočky jsou nyní připraveny k nošení.

13. Použitý roztok zlikvidujte a nádobku s držáky čoček opláchněte sterilním fyziologickým roztokem – **NEPOUŽÍVEJTE VODU Z VODOVODU ANI JINÉ NESTERILNÍ KAPALINY.**

14. Nechte se osušit na vzduchu z držáku čoček mimo nádobku a ochrannými košíčky nahoru (viz obrázek 7). Nepokládávejte pouzdro na čočky na boční stranu.

15. Pokud si kontaktní čočky nechcete nasadit do očí hned po dezinfekci / neutralizaci, můžete je 14 dní uchovávat v neutralizovaném roztoku AOSEPT<sup>TM</sup> PLUS s HydraGlyde<sup>TM</sup> v neotevřeném pouzdu na kontaktní čočky AOcup. Po uplynutí této doby se musí kontaktní čočky před nošením vyčistit a vydezinfikovat roztokem AOSEPT<sup>TM</sup> PLUS s HydraGlyde<sup>TM</sup>.

**INDIKACE (důvodů k použití):**

Systém péče o kontaktní čočky AOSEPT<sup>TM</sup> PLUS s HydraGlyde<sup>TM</sup> je určen k čištění, dezinfekci, neutralizaci, odstraňování proteinů a uchování všech typů měkkých (hydrofilních) kontaktních čoček (včetně silikonhydrogelových) a tvrdých plynopropustných (fluorosilikonakrylátových a silikonakrylátových) čoček podle doporučení očního specialisty.

**PŘEDPOKLADÁNÍ UŽIVATELE:**

Systém péče o kontaktní čočky AOSEPT<sup>TM</sup> PLUS s HydraGlyde<sup>TM</sup> je určen k používání spotřebiteli a očními specialisty pro všechny typy měkkých (hydrofilních) kontaktních čoček (včetně silikonhydrogelových) a tvrdých plynopropustných kontaktních čoček.

**KLINICKÉ VÝHODY:**

Při použití podle návodu čistící a dezinfekční roztok AOSEPT<sup>TM</sup> PLUS s HydraGlyde<sup>TM</sup>.

- Zajišťuje jedinečné čistící působení, které odstraňuje z povrchu kontaktních čoček povlak a částecy nečistot.

- Pomáhá předcházet závažným očním infekcím tím, že na kontaktních čočkách ničí škodlivé mikroorganismy.

- Zajišťuje zlepení a děle trvající zvlhčení měkkých hydrofilních hydrogelových kontaktních čoček (včetně silikonhydrogelových), které jsou rozložené otevíráním během režimu čištění a dezinfekce.

- Má sloužit bez konzervačních látek, aby se minimalizovala pravděpodobnost přecitlivělosti na přípravek.

**TELJESÍTMÉNYJELLEMZŐK:**

A klinikai vizsgálattalból származó bizonyítékok, a közéleti kémiai szakirodalom és a klinikai tapasztalatok (Torgalomba hozatal utáni felügyelet) alapján az AOSEPT<sup>TM</sup> PLUS HydraGlyde<sup>TM</sup> lencsepótlási rendszer minden típusú lágy (hidrofil) kontaktlencsével (beleértve a szilikon-hidrogélt is) és kemény gázáteresztő lencse tisztítására, fertőtlenítésére, kozmóboztetésére, fehérje eltávolítására és tárolására szolgál.

**ELLENJAVALLATOK (Mikor ne alkalmazzuk):**

- Ne használja az AOSEPT<sup>TM</sup> PLUS HydraGlyde<sup>TM</sup> oldatot bármelyik szembeni allergia esetén!

- Soha ne használja az AOSEPT<sup>TM</sup> PLUS HydraGlyde<sup>TM</sup> oldatot hűvös, törékeny kontaktlencsékhez!

**FIGYELMEZTETÉSEK!**

- A visszajátható kupak csapentőjének piros színe azt jelenti: Soha nem kerülhet kozmóboztetés nélküli AOSEPT<sup>TM</sup> PLUS HydraGlyde<sup>TM</sup> oldat közvetlenül a szembe!

- SOHA ne tegyen AOSEPT<sup>TM</sup> PLUS HydraGlyde<sup>TM</sup> oldatot a kontaktlencsére közvetlenül a szembe történő behelyezés előtt!

- A lencsék elhelyezése előtt legalább 6 órával kell áztatni a mellékelt lencsétartó tokban (kozmosztetés folyamata). A KOZMOSZTÉTUS NÉLKÜL AOSEPT<sup>TM</sup> PLUS HYDRAGLYDE<sup>TM</sup> OLDAT NEMGYON HATÉKONY FERTŐTLENÍTŐ SZER, AMELY EGŐ ÉS SZÜRŐ ERZÉST ÖKOZ A SZEMRE BÉRHETÉSEK LÉPVE. Ha véletlenül kozmóboztetés nélkül kerül a szembe a lencse, azonnal távolítsa el, mielőtt pedig nyitott állapotban bőségesen mosson kezeit, öblítse le és szárazítsa meg a kezét.

- SOHA NE PRÓBLÁJA MEG LENCSÉT MÉS TISZTÍTÓSZERREL, MEGTISZTÍTANI, MIVEL A TISZTÍTÓSZER MARADÉKA HARBÁZS FOG EREDMÉNYEZNI, AMELY AZ OLDATNAK A LENCSEARTÓ TOKBÓL VALÓ KIFOLYÁSÁHOZ, VALAMINT AZ AOSEPT<sup>TM</sup> PLUS HYDRAGLYDE<sup>TM</sup> OLDAT ELTELEGEN KOZMÓBOSZTÉSEHEZ VEZET.

- A termék hatékonyagán nem tartás.

- KIZÁRÓLAG A MELLEKELTEN KAPOTT AOcup LENCSEARTÓ TOKOT HASZNÁLJA. NE HASZNÁLJON SEMMILYEN MÁS LENCSEARTÓ TOKOT!

- Ne használjon más oldatot a mellékelt kapott lencsétartó tokkal!

- Mindig friss AOSEPT<sup>TM</sup> PLUS HydraGlyde<sup>TM</sup> oldatot használjon, soha ne használja újra a már használt oldatot a lencsétartó tokban.

- SOHA ne higítsa vagy vegyítse az AOSEPT<sup>TM</sup> PLUS HydraGlyde<sup>TM</sup> oldatot más oldattal, mivel ez túlzottné a teljesítményességét!

- SOHA ne töltse át az AOSEPT<sup>TM</sup> PLUS HydraGlyde<sup>TM</sup> oldatot másik tartályba!

- GYŰVES ÉLETRŐL, HOGY KONTAKTLENCSÉK SOHA NE ERINTKEZNEK NEM STERIL FOLVADÉKKAL (PÉLDÁUL CSAPVÍZZEL VAGY IVÓVÍZZAL), MERT EZ MIKROBIÁLIS SZENYVEDÉSHEZ VEZETHET, AMI MARADANDÓ SZEMKÁROSODÁS ÖKOZHAT.

- GYERMEKEK ELŐL ELZÁRVA TARTANDÓ!

- A kozmóboztetés nélküli AOSEPT<sup>TM</sup> PLUS HydraGlyde<sup>TM</sup> oldat lenyelése azonnal igyon nagy mennyiségű vizet és keresse fel kezelőorvosát!

- Konzultáljon kezelőorvosával vagy szemészet szakemberével, mielőtt bármilyen gyógyszerrel használja a kontaktlencse viselésével egyidejűleg.

A lencsék és a lencsepótlási termékek megfelelő használatához és gondozásához, ideértve a lencsétartótokot is, elengedhetetlen, hogy kövesse a szemészeti szakember útmutatásait és a kiegészítő utasításokat.

**ELŐVIGYÁZATOSSÁG:**

- Mindig mosson kezeit, öblítse le és szárazítsa meg a kezét mielőtt a lencséhez nyúlna.

- Ne használja a lencsét elhelyezési idő után.

- FELBONTÁS VEDELEM: Ne használja, ha a flakon kupakja körül biztonsági zár sérült vagy hiányzik.

- Ne használja a terméket, ha a csomagolás vagy a flakon (steril csomagolás) vagy a lencsétartó sérült.

- Minden egyes használat után a flakon leghatékonyan kikapcsolás során zárja vissza.

- A flakon felbontása után 3 hónapnál tovább nem használható oldatot.

- A beszemélyesedése elkerülése érdekében a flakon csapentőjét soha ne érintse semmilyen felülettel.

- Minden egyes új flakon AOSEPT<sup>TM</sup> PLUS HydraGlyde<sup>TM</sup> oldathoz a flakonhoz mellékelt kapott új AOcup lencsétartó tok használja.

- Legfeljebb 25°C-on tárolandó.

- Az AOSEPT<sup>TM</sup> PLUS HydraGlyde<sup>TM</sup> oldatot mindig 15°C és 25°C közötti hőmérsékleten használja, mert a kozmóboztetés 15°C alatt 6 órával is hosszabb időt vehet igénybe.

- A közvetlen napfénytől védve tárolandó!

- Lencsepótló oldatát váltása előtt konzultáljon szemészeti szakemberével.

**NEM VÁRT HATÁSOK:**

Ha a készítmény használatán során tartós diszkomfort érzés vagy irritáció lépne fel, távolítsa el a lencsét, függessze fel a készítmény használatát és konzultáljon szemészeti szakemberével!

**Súlyos események jelentése:**

Jelen orvostechikai eszköz használatával kapcsolatos bármely súlyos eseményről értesíteni kell az Alcon Laboratories Inc.-t

Fontos: az országban lévő helyi Alcon képviselőhez vagy forgalmazójához.

Email : qa.complaints@alcon.com

Weboldal : https://www.alcon.com/contact-us

Ezeket a súlyos eseményeket jelenteni kell az Ön országának orvostechikai eszközeikkel kapcsolatos ügyekben illetékes hatóságának is.

**KISZERELÉS:**

A szűréselt sterilizált AOSEPT<sup>TM</sup> PLUS HydraGlyde<sup>TM</sup> oldat 90 ml-es és 360 ml-es kiszerelésben kapható. Minden flakon AOSEPT<sup>TM</sup> PLUS HydraGlyde<sup>TM</sup> oldat AODISC<sup>TM</sup> kozmóboztétus tartalmazó lencsétartó tokkal kerül forgalomba. A gyártási szám és a lejáratú dátum a flakonon és a lencsétartó tokon látható.

**STERILIZÁCIÓ:** Azeptikus feldolgozási technikák alkalmazásával sterilizált.

- Je kompatibilni se všem tradičním hydrogelovými kontaktními čočkami, silikonhydrogelovými a tvrdými plynopropustnými kontaktními čočkami.
- Celodenní pohodlí
- Je pohodlný: systém jedné lahvičky nabízí v porovnání se systémem s více lahvičkami nebo teplou dezinfekcí jednoduché a snadné použití a zamezuje záměnam roztoků. Kontaktní čočky lze uchovávat až 14 dní po dezinfekci.

**FUNKČNÍ VLASTNOSTI:**

Podle celkového souboru důkazů z klinických výzkumů, publikované literatury a klinických zkušeností (poproředního dozoru) působí systém péče o kontaktní čočky AOSEPT<sup>TM</sup> PLUS s HydraGlyde<sup>TM</sup> zamýšleným způsobem při čištění, dezinfekci, neutralizaci, odstraňování proteinů a uchování všech typů měkkých (hydrofilních) kontaktních čoček (včetně silikonhydrogelových) a tvrdých plynopropustných čoček.

**KONTRAINDIKACE (kdy nepoužívat)**

- Nepoužívejte v případě alergie na jakoukoliv složku přípravku.
- Nikdy nepoužívejte AOSEPT<sup>TM</sup> PLUS s HydraGlyde<sup>TM</sup> pro dezinfekci teplem.

**VAROVÁNÍ:**

• **Cervená barva odklápacího víčka znamená: Nikdy nenamážete roztok AOSEPT<sup>TM</sup> PLUS s HydraGlyde<sup>TM</sup> přímo do oka.**

• **NIKDY** nenamážete roztok AOSEPT<sup>TM</sup> PLUS s HydraGlyde<sup>TM</sup> na kontaktní čočku bezprostředně před nasazením do oka.

• **Čočky musí být ponoreny v dodaném pouzdu na kontaktní čočky nejméně po dobu 6 hodin (neutralizační proces) před nasazením do oka. NEZNEUTRALIZOVANÝ AOSEPT<sup>TM</sup> PLUS S HYDRAGLYDE<sup>TM</sup> JE VYSOCE ÚČINNÝ DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDEK, KTERÝ PŘI KONTAKTU S OKEM ZPŮSOBÍ POCIT PÁLENÍ A STÍPÁNÍ. Pokud si omylem nasadíte neneutralizovanou čočku, okamžitě ji vyjměte a vypláchněte očko velkým množstvím sterilní vody nebo sterilním fyziologickým roztokem. Před opětovným nasazením čočky zapakujte výše uvedený postup dezinfekce. Pokud pálení nebo stípání trvá, vyhledejte před dalším nošením čoček pomoc očního specialisty.**

• **NIKDY** SE NEPOKOUŠEJTE KONTAKTNÍ ČOČKY PŘI ČIŠTĚNÍ NEBO OPLÁCHOVÁNÍ ROZTOKEM AOSEPT<sup>TM</sup> PLUS S HYDRAGLYDE<sup>TM</sup> DRŽET V RUKOU. PO KONTAKTU S NEZNEUTRALIZOVANÝM ROZTOKEM MŮŽE DOJÍT K DOČASNĚMU ODBARVENÍ (VYBĚLENÍ) PRSTŮ NEBO RUKOU. Po manipulaci s roztokem si vždy umyjte, opláchněte a osušte ruce.

• **NIKDY** SE NEPOKOUŠEJTE KONTAKTNÍ ČOČKY ČISTIT SAMOSTATNĚM ČISTIČNÍM PŘÍPRAVKEM, PROTOŽE JAKÉKOLI ZBYTKY TOHOTO PŘÍPRAVKU VYVOLAJÍ PĚNĚNÍ A NÁSLEDNĚ PŘETĚKÁNÍ ROZTOKU Z POUZDRA NA KONTAKTNÍ ČOČKY A NEÚPLNOU NEUTRALIZACI ROZTOKU AOSEPT<sup>TM</sup> PLUS S HYDRAGLYDE<sup>TM</sup>.

• Pro zachování účinnosti přípravku:

- **POUŽÍVEJTE POUZE PŘÍLOŽENÉ POUZDRO NA KONTAKTNÍ ČOČKY AOcup. NEPŮJÍVEJTE JINÁ POUZDRA NA KONTAKTNÍ ČOČKY.**
- S příloženým pouzdem na kontaktní čočky nepoužívejte jiný roztok.
- Vždy používejte čerstvý roztok AOSEPT<sup>TM</sup> PLUS s HydraGlyde<sup>TM</sup> - roztok v pouzdu nikdy nepoužívejte znovu.

• **NIKDY** roztok AOSEPT<sup>TM</sup> PLUS s HydraGlyde<sup>TM</sup> neřeďte ani nemíchejte s žádným jiným roztokem, protože by tím ztratil svoji účinnost.

• **Nikdy nepřevlézte roztok AOSEPT<sup>TM</sup> PLUS s HydraGlyde<sup>TM</sup> do jiné nádoby.**

• **KONTAKTNÍ ČOČKY NENECHTE NIKDY PŘÍLIŠ DĚLU S NESTERILNÍMÍM KAPALINAM (VČETNĚ VODY Z VODOVODU A SLUNAM), PROTOŽE BY MOHLI DOJÍT K MIKROBIÁLNÍM KONTAMINACI, KTERÁ MŮŽE VEST K TRVALÉMU POŠKOZENÍ OČÍ.**

• **UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTI.**

• **V případě požití neneutralizovaného roztoku AOSEPT<sup>TM</sup> PLUS s HydraGlyde<sup>TM</sup> ihned vypijte velké množství vody a vyhledejte lékaře.**

• **Před užíváním léků při nošení kontaktních čoček se poraďte s lékařem nebo očním specialistou. Řiďte se pokyny očního specialisty a všemi návody ke správnému používání a ošetřování kontaktních čoček a výrobků určených k péči o kontaktní čočky, včetně pouzdra na kontaktní čočky.**

**BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:**

• Před manipulací s kontaktními čočkami si vždy umyjte, opláchněte a osušte ruce.

• Roztok nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti (data expirace).

• **VIDITELNÉ NARUŠENÍ OBBALU:** Přípravek nepoužívejte, pokud je bezpečnostní fólie na víčku láhve poškozena nebo chybí.

• Nepoužívejte, pokud jsou obal či láhev (sterilní balení) nebo pouzdro na kontaktní čočky poškozené.

• Po každém použití vždy pevně uzavřete odklápací víčko na láhev.

• Po 3 měsících po otevření láhve zlikvidujte veškeré zbytky roztoku.

• Abyste se vyhnuli kontaminaci, nikdy se koncem kapátka láhve ničeho nedotýkejte.

• Při otevření každé láhve roztoku AOSEPT<sup>TM</sup> PLUS s HydraGlyde<sup>TM</sup> vždy použijte příložené nové pouzdro na kontaktní čočky AOcup.

• Neuvolňujte při teplotě nad 25°C.

• Roztok AOSEPT<sup>TM</sup> PLUS s HydraGlyde<sup>TM</sup> vždy používejte při teplotách v rozmezí od 15°C do 25°C, protože při teplotách nižších než 15°C může neutralizace trvat déle než 6 hodin.

• Při skladování nevstavujte přímému slunečnímu světlu.

• Před změnou roztoku po péči o kontaktní čočky se poraďte s očním specialistou.

**NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY:**

Při přetvářivém pocitu nepohody nebo podráždění si vyjměte kontaktní čočky, přestaňte přípravek používat a poraďte se s očním specialistou.

**Hlášení závažných mimořádných událostí:**

Každou závažnou mimořádnou událost související s tímto zdravotnickým prostředkem je třeba hlásit společnosti Alcon Laboratories, Inc.:

obraťte se na místní zastoupení ve své zemi nebo na svého distributora výrobků Alcon. Email : qa.complaints@alcon.com

Webové stránky : https://www.alcon.com/contact-us

Tyto závažné mimořádné události je třeba hlásit také příslušnému orgánu pro zdravotnické prostředky ve vaší členské zemi.

**BALENÍ:**

Roztok AOSEPT<sup>TM</sup> PLUS s HydraGlyde<sup>TM</sup> se dodává v plastových láhvích o objemu 90 ml a 360 ml. Ke každé láhvi roztoku AOSEPT<sup>TM</sup> PLUS s HydraGlyde<sup>TM</sup> je příložené pouzdro na kontaktní čočky s neutralizačním diskem AODISC<sup>TM</sup>. Láhve a krabíčky jsou označeny číslem šarže a datem expirace.

**STERILIZÁCI:**

Azeptikus sterilizációval készítették a kontaktlencsék használatára.

**VALAMINT BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZ. KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG, HOGY SZÜKSÉG ESETÉN A JÖVŐBEN IS HASZNÁLNI TUDJA! A NEM MEGFELELŐ LENCSÉPVÁLTÁS SÜLYÖS SZEMÉSZETI PROBLÉMÁKAT EREDMÉNYEZHET.**

**TERMÉK NEVE:**  
AOSEPT<sup>TM</sup> PLUS

3%-os hidrogén-peroxid  
tisztító és fertőtlenítő oldat  
HydraGlyde<sup>TM</sup> nedvesítő mátrix-szal

Lágy (hidrofil) kontaktlencsékhez (beleértve a szilikon-hidrogél lencsét is) és kemény gázáteresztő (fluor-szilikon-akrilát és szilikon-akrilát) lencsékhez.

**LEÍRÁS:**

Az AOSEPT<sup>TM</sup> PLUS HydraGlyde<sup>TM</sup> rendszer két részből áll: AOSEPT<sup>TM</sup> PLUS tisztító és fertőtlenítő oldat HydraGlyde<sup>TM</sup> nedvesítő mátrix-szal (lásd az 1. képet), és AOcup lencsétartó tok (lásd a 2. képet). Az AOcup lencsétartó tok részei: az átjárású tartály, a lecsavarható tetőhöz kapcsolódó lencsétartó (kosár) és az aljához rögzített AODISC<sup>TM</sup> kozmóboztétus katalizátor. Győződjön meg használat előtt arról, hogy a tok tartalmazza az AODISC<sup>TM</sup> et, mivel ez nélkülözhetetlen a hidrogén-peroxid kozmóboztetéshez. Az AOSEPT<sup>TM</sup> PLUS HydraGlyde<sup>TM</sup> oldatot és az AOcup lencsétartó tokot mindig együtt kell használni.

A tartósítozóer-mentes, vizes AOSEPT<sup>TM</sup> PLUS oldat HydraGlyde<sup>TM</sup> nedvesítő mátrix-szal 3%-os hidrogén-peroxidot, foszforosavat (stabilizátor), nátrium-kloridot, foszfátot (puffer rendszer), polysamert (felületaktív anyagot) és HydraGlyde<sup>TM</sup> nedvesítő mátrix-ot (EO80-21<sup>TM</sup> - polioxietilén-polioxibutylén) tartalmaz.

**HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:**

**SOHA** ne kerüljön az AOSEPT<sup>TM</sup> PLUS HydraGlyde<sup>TM</sup> oldat a szembe, VAGY a kontaktlencsére közvetlenül a szembe történő behelyezés előtt. Ebben az esetben égő és száraz érzést okozhat.

1. Mossa meg a kezét és egy száraz, szőrmeszes törülközővel törölje szárazra.

2. Ugyanúgy az „L” jelölésű lencsétartót, vagyé ki a bal oldali lencsét elhelyezze a dobmanultra. Csukja be a lencsétartó tokot, ügyelje arra, hogy ne csipje be a lencsét a tartóba.

3. A jobb oldali lencsével ismételtje meg a folyamatot, helyezze a lencsét az „R” jelölésű lencsétartó dobmanultra.

4. Ugyanúgy ki az AOSEPT<sup>TM</sup> PLUS HydraGlyde<sup>TM</sup> flakon, a leghatékonyabban tartóba hátra, hogy ne legyen átlátszó.

5. Alaposan öblítse le a lencsétartóban lévő lencsését 5 másodpercen keresztül AOSEPT<sup>TM</sup> PLUS HydraGlyde<sup>TM</sup> oldattal (lásd a 3. képet).

6. Töltse fel a tartályt AOSEPT<sup>TM</sup> PLUS HydraGlyde<sup>TM</sup> oldattal a jelölésig, NE TÖLTÖN BELE KEVESEBBET VAGY TÖBGET (lásd a 4. képet).

7. Helyezze be a lencsétartót a tartályba és

**DŹELNĚJŠI INSTRUKCJA ZAWIERA ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE**

**SPOSOBY UŻYCIA I BEZPIECZNE STANOWIENIA PRODUKTU. PROSIMY O JEJ UWAGNE PRZECZYTANIE I ZACHOWANIE. ABY W RAZIE POTRZEBY MÓCJA PONÓWNIŁE PRZECZYTAĆ. NIEPRAWIDŁOWA PILEGACJA SOZEWKÓW KONTAKTOWYCH MOŻE BYĆ PRZYCYNĄ POWAŻNYCH PROBLEMÓW DOTYCZĄCYCH OCZY.**

**MAZNA PRODUKTU:**

**AOSEPT<sup>®</sup> PLUS**

3% nadlutek wodoru

Płyn do czyszczenia i dezynfekcji

z formułą nawilżającą HydrAGlyde<sup>™</sup>

Do miękkich (hydrofilowych) soczewek kontaktowych (w tym soczewek silikonowo-hydrogelowych) i twrdych gazoprzepuszczalnych soczewek kontaktowych (fluoro-silikonowo-akrylowych i silikonowo-akrylowych).

**OPIS:**

System pielęgnacyjny AOSEPT<sup>®</sup> PLUS z formułą nawilżającą HydrAGlyde<sup>™</sup> Moisture Matrix zawiera: płyn czyszczący i dezynfekujący AOSEPT<sup>®</sup> PLUS z nadlutek wodoru, 3% nadlutek wodoru, 3% nadlutek wodoru, kwas fosforowy (stabilizator), chlorokwarcowy, system bufferski (płyn czyszczący i dezynfekujący) oraz formułę nawilżającą HydrAGlyde<sup>™</sup> Moisture Matrix (EOB-21<sup>™</sup> – poliuretan etylenowy-polilakten butylenowy).

**SPOSOB UŻYCIA:**

**NIGDY nie wolno wkładać plemnika AOSEPT<sup>®</sup> PLUS z HydrAGlyde<sup>™</sup> do oka ANI na soczewkę kontaktową bezpośrednio przed założeniem soczewki do oka. W przeciwnym razie wystąpi uczucie pieczenia i klucia.**

1. Umij rękami czystymi, nieprzecieraającymi włosami rękami.

2. Otwórz pojemnik „o soczewki oznaczony „1”. Zdjąć jedną soczewkę i umieścić ją na kopułce. Zamknij ostrożnie kopułkę soczewki, aby uniknąć uszkodzenia soczewki.

3. Powtórz procedurę z drugą soczewką umieszczając ją na kopułce oznaczonej „2”.

4. Otwórz zamknięcie na butele AOSEPT<sup>®</sup> PLUS z HydrAGlyde<sup>™</sup> i odczytaj ją do tyłu aby nie przeszkadzała.

5. Dokładnie opłukaj soczewki w koszykach płynem AOSEPT<sup>®</sup> PLUS z HydrAGlyde<sup>™</sup> przez 5 sekund (patrz rysunek 3).

6. Napelnij pojemnik płynem AOSEPT<sup>®</sup> PLUS z HydrAGlyde<sup>™</sup> do poziomu linii „NIE NAPELNIJ POJEMNIKA ANI PONIEŻY, ANI POWIŻEJ POZIOMI LINIJI (patrz rysunek 4).

7. Umieść koszyk z soczewkami w pojemniku i dokładnie zamknij. Nie zakreślaj zbyt mocno pojemnik na soczewki AOCup (tylko sąj pałców). NIE POTRZĄSAJ POJEMNIKIEM NA SOZEWKI.

8. Pojemnik na soczewki przechowuj w pozycji pionowej (patrz rysunek 5).

9. Jeśli z otworu na soczewki pochodzą na soczewki wydostające się bąbelki, może to świadczyć o tym, że w pojemniku znajduje się nieneutralizowany płyn AOSEPT<sup>®</sup> PLUS z HydrAGlyde<sup>™</sup>. Należy wyciągnąć pojemnik na soczewki i zmyć cały roztwór płynu z powierzchni, na której stał pojemnik AOCup. Należy dokładnie opłukać pojemnik na soczewki i koszyk sterylując sół fizjologiczną. W razie roduzenia płynu, należy natychmiast usunąć go papierośwym rękawiczkami. Przed kontaktem z soczewkami lub z okiem należy dokładnie umyć ręce. NALÉZY POWTÓRZYĆ PROCEDURE CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI.

10. Soczewki pozostaw w pojemniku przez co najmniej 6 godzin (patrz rysunek 6) lub przez całą noc w celu neutralizacji płynu.

11. Jeśli jest to pożądané lub zalecane przez specjalistę: opłucz soczewki przed założeniem STERYLNYM SŁĄŻIZIOWCZYNĄ po neutralizacji. Nie używaj płynu AOSEPT<sup>®</sup> PLUS z HydrAGlyde<sup>™</sup> do płukania soczewek przed założeniem.

12. W tym momencie soczewki są gotowe do noszenia.

13. Używaj płynu należy używać, opłukaj pojemnik na soczewki i koszyk sterylując sół fizjologiczną – NIE WOLNO UŻYWAĆ WODY Z KRAJIN ANI INNYCH NIESTERYLNYCH CIECZÓW.

14. Pozwól na wyschnięcie koszyka na soczewki w powietrzu odwracając go pionowo na zakrytej (patrz rysunek 7). Nie kładź pojemnika na soczewki na bok.

15. Jeśli soczewki nie będą noszone bezpośrednio po dezynfekcji/neutralizacji, można przechowywać je w neutralizującym płynie AOSEPT<sup>®</sup> PLUS z HydrAGlyde<sup>™</sup>, w nietworzącym pojemniku na soczewki AOCup przez okres do 14 dni. Po tym czasie soczewki muszą być oczyszczone i zdezynfekowane płynem AOSEPT<sup>®</sup> PLUS z HydrAGlyde<sup>™</sup> przed założeniem (z zachowaniem czasu potrzebnego na neutralizację - 6 godzin).

**WSKAZANIA (Zastosowania):**

System pielęgnacyjny AOSEPT<sup>®</sup> PLUS z HydrAGlyde<sup>™</sup> jest przeznaczony do czyszczenia, dezynfekcji, neutralizacji, usunięcia nadmiarów szkodliwych i przechowywania wszystkich rodzajów miękkich (hydrofilowych) soczewek kontaktowych (w tym soczewek silikonowo-hydrogelowych) i twrdych gazoprzepuszczalnych soczewek kontaktowych (fluoro-silikonowo-akrylowych i silikonowo-akrylowych) zgodnie z zaleceniami specjalisty.

**PRZEWIADZIANIA DLA:** Płyn do pielęgnacji soczewek AOSEPT<sup>®</sup> PLUS z HydrAGlyde<sup>™</sup> jest przeznaczony do używania przez konsumentów i specjalistów w wszystkim rodzajach miękkich (hydrofilowych) soczewek kontaktowych (w tym soczewek silikonowo-hydrogelowych) i twrdych gazoprzepuszczalnych soczewek kontaktowych.

**KORZYSCY KLINICZNE:**

Kiedy stosowany jest zgodnie z zaleceniami, płyn AOSEPT<sup>®</sup> PLUS z HydrAGlyde<sup>™</sup>:

• Zapewnia wyjątkowo działanie czyszczące, które usunie depozyty i zanieczyszczenia z powierzchni soczewek kontaktowych.

• Pomaga zapobiegać poważnym zakażeniom oczu, zabijając szkodliwe mikroorganizmy na soczewkach kontaktowych.

• Zapewnia lepsze widzenie i dłuższe czasy nawiązania miękkich hydrofilowych soczewek hydrogelowych (także soczewek silikonowo-hydrogelowych), które są poddawane działaniu roztworu podczas procedury czyszczenia i dezynfekcji.

• Ma formułę bez konserwantów, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo nadrażalności na produkt. Jest kompatybilny ze wszystkim tradycyjnymi hydrogelowymi, silikonowo-hydrogelowymi i twrdymi gazoprzepuszczalnymi soczewkami kontaktowymi.

**POKRYWIA NA POŻYTIU:**

• NIGDY nie nanażaj roztoku AOSEPT<sup>®</sup> PLUS z zvlhčujícími zvlhčujícími HydrAGlyde<sup>™</sup> do oka ANI na kontaktne soczewki bezpośrednio przed nasadzeniem do oka. Pokiaľ tak urobite, spôsobite pálenie a svrbenie v oku.

• Umyte r a ruky a oštieh čistou rúkami.

• Otvorte košičku označenú „1” a v vyčistenú časť polozte vaše ľavé šošovky. Košičku zavrite, dajte na ťa, aby ste kontaktovali šošovky nepriepri.

• Rovnako spôsobom umiestnite pravú kontaktnú šošovku na vyčistenú časť košičky označenej „2”.

• Otvorte odklápacie viečko z fliašky s roztokom AOSEPT<sup>®</sup> PLUS so zvlhčujúcou zvlhčujúcou HydrAGlyde<sup>™</sup> a odskopajte na stranu.

• Dôkladne opláchnite šošovky umiestnené v košičku roztokom AOSEPT<sup>®</sup> PLUS so zvlhčujúcou zvlhčujúcou HydrAGlyde<sup>™</sup> po dobu 5 minút (pozri obrázok 3).

• Naplnite nádobku puždu roztokom AOSEPT<sup>®</sup> PLUS so zvlhčujúcou zvlhčujúcou HydrAGlyde<sup>™</sup> po plnlinu značku (rysunok, NIE NEPLNIJTE ANI NEVYŠTEJTE NEDOSTAČNÉ (pozri obr. 4).

• Viečko držte so šošovkami do nádoby a zabránenie puzrovanie vzduchu. Puzdro na šošovky AOCup neodkladne prelejte nádobkou buj puzry. NIE POTRZÁVAJTE NÁDOBKU OČI.

• Puzdro neotvárajte vzhladom (pozri obr. 5).

• Pokiaľ sa z otvoru viečka puzdra uvoľnia búblik, mohli dŹijť k tomu, že va zostal neneutralizovaný roztok AOSEPT<sup>®</sup> PLUS so zvlhčujúcou zvlhčujúcou HydrAGlyde<sup>™</sup>. Je potrebné puzdro vyprázdiť a opláchnuť vyliaty roztok fľytkou, hoto stalo puzdro AOCup. Dôkladne vypláchnite nádobku a košičku sterylím sôľ fizjologičnou roztokom. Ak dŹijde k rozliatiu, okamžite vyčistite papierošvými rukavicami. Dôkladne i umyte vaše ruky pred manipuláciou so šošovkami alebo pred dotýkaním sa ok. ZOPAKUJTE VŠETKY UVEDENÉ BEZPEČNOSTNÉ PROCESY.

• Šošovky ponešajte ponorené v roztoku po dobu minimálne 6 hodín (pozri obr.) alebo cez noc, kvôli neutralizácii roztoku.

• Po umytí, opláchnutí a vysušení rúk, kontaktné šošovky vyberte z košičky.

• Poďa vlastného pŹiadania, alebo doporučenia ošimho špecialistu, kontaktné šošovky po neutralizácii pred nasadením do oka opláchnite STERYLNYM FYZIOLOGIČNÝM ROZTOKOM. AOSEPT<sup>®</sup> PLUS so zvlhčujúcou zvlhčujúcou HydrAGlyde<sup>™</sup> nepoužívajte k opláchnutiu kontaktných šošoviek pred nasadením do oka.

• Všet šošovky si teraz pripravte na nasadenie.

• Použitý roztok vylite, vypláchnite nádobku a košičku sterylím fyzjologičnou roztokom – NEPOUŽÍVAJTE VODU Z VODOVODU ALEBO NESTERYLNY VODU.

• ObdŹie čistá košička prevŹarí mŹo nádobku a nechaťe vyschnuť na vzduchu (pozri obr.)

• Pokiaľ nepoužívate vaše kontaktné šošovky nasadiť do očí priamo po dezynfekcii/neutralizácii, môžete ich uchovávať v neutralizujúcom roztoku AOSEPT<sup>®</sup> PLUS so zvlhčujúcou zvlhčujúcou HydrAGlyde<sup>™</sup>, v nepoškodzujúcom puzdre AOCup až do 14 dní. Po tomto čase, musia byť vaše kontaktné šošovky pred nošením vyčistené a dezinfikované roztokom AOSEPT<sup>®</sup> PLUS so zvlhčujúcou zvlhčujúcou HydrAGlyde<sup>™</sup>.

**INDIKÁCIE (použitie):**

System starostlivosti o kontaktné šošovky AOSEPT<sup>®</sup> PLUS so zvlhčujúcou zvlhčujúcou HydrAGlyde<sup>™</sup> je určený na čistenie, dezynfekciu, neutralizáciu, odstránenie proteínov a uchovávanie všetkých typov mäkkých (hydrofilových) kontaktných šošoviek (vrátane silikóno-hydrogelových) a tvrdých fluoro-silikonovo-akrylátových a silikonovo-akrylátových kontaktných šošoviek prespustných pre plyn, ako je odporúčenie ošimho špecialistu.

**CIELOVA POPULÁCIA:**

System starostlivosti o kontaktné šošovky AOSEPT<sup>®</sup> PLUS so zvlhčujúcou zvlhčujúcou HydrAGlyde<sup>™</sup> je určený na použitie spotrebiteľmi a ošimho špecialistami so všetkými typmi mäkkých (hydrofilových) kontaktných šošoviek (vrátane silikóno-hydrogelových) a tvrdých kontaktných šošoviek prespustných pre plyn.

**KLINICKE VÝHODY:**

Pri použití podľa nárokov, čistá a dezinfikovaná kontaktná šošovka AOSEPT<sup>®</sup> PLUS so zvlhčujúcou zvlhčujúcou HydrAGlyde<sup>™</sup> zanechá jednotlivo čistejšie povrchy, ktoré odstraňuje z povrchu kontaktných šošoviek povlak a časticky nečistoty.

Pomáha predchádzať závažným ošimho infekciám tým, že na kontaktných šošovkách ničí škodlivé mikroorganizmy.

Ma zloženie bez konzervantů, aby sa minimalizovala pravdepodobnosť precitlivosti na prípravok. Používatelne pohodlie po celý deň.

Je kompatibilný so všetkými tradičnými hydrogelovými kontaktnými šošovkami, silikóno-hydrogelovými a tvrdými kontaktnými šošovkami prespustnými pre plyn.

Je pohodlný systém jednej fliašky ponuky v porovnaní so systémom s viacerými fliaškami alebo tepelnou dezinfekciou, pretože táto je ľahšie použiteľná a zabírajúce menšiu roztokom. Kontaktné šošovky je možné uchovávať až 14 dní po dezynfekcii.

• Zapewnia komfort przez cały dzień.

• Jest wygodny: system z jednŹa butelkŹ zapewnia prostŹatŹe łatwego uŹycia w porównaniu z systemem z wieloma butelkami lub dezynfekcjŹami i umiernenŹa zmianŹe roztworu w porównaniu z systemem z dwiema butelkami. Soczewki można przechowywać do 14 dni po dezynfekcji.

**CHARAKTERISTYKA OZVLAKNINA:**

Opisuje: si na očim materiaci dvojnásobným z badaŹ klinických, opublikovanŹ literaturou klinickŹi doŹivŹiŹenŹi klinickým (nŹadŹr po vprŹavení do očim), system do pielęgnacji soczewek AOSEPT<sup>®</sup> PLUS z HydrAGlyde<sup>™</sup> deŹala oŹe zjednodŹi z procesem z czyszczenia, dezynfekcji, neutralizacji, usuania osadnŹ bŹialkowych i przechowywania wszystkich rodzajnŹ miękkich (hydrofilowych) soczewek kontaktowych (w tym soczewek silikonowo-hydrogelowych) i twrdych soczewek gazoprzepuszczalnych.

**PRZECZYTAJĄCZANIE (použitie, aby nie szkodilo):**

• NIE UŻYWAJ W PRZYPADEK UCIECZENIA NA STERYLIZOWANEJ NÁDOBCE.

• Nie wolno stosować płynu AOSEPT<sup>®</sup> PLUS z HydrAGlyde<sup>™</sup> do dezynfekcji termicznej.

**OSTROZEWNIENIA**

• **Colorway kolor zamknięcia oznacza: NIGDY nie wolno wkładać plemnika AOSEPT<sup>®</sup> PLUS z HydrAGlyde<sup>™</sup> bezpośrednio do oka.**

• **NIGDY nie wolno nanażać płynu AOSEPT<sup>®</sup> PLUS z HydrAGlyde<sup>™</sup> na soczewki kontaktowe bezpośrednio przed założeniem soczewki do oka.**

• **Soczewki muszą być namazane w dostarczonym pojemniku na soczewki przez co najmniej 6 godzin (proces neutralizacji) przed założeniem. NIE NEUTRALIZUJAMY PŁYNEM AOSEPT<sup>®</sup> PLUS Z HYDRAGLYDE<sup>™</sup> JEŚLI NIE SĄ ODALAJĄCYMI ŚRODKIEM DEZYNFEKCJI, KTORI SPOROBUJĄ UCIECZENIA I KLUCIA W PRZYPADEK ODPUSZCZENIA DO KONTAKTU Z OKIEM. W RAZIE PRZYPADEKOWO ZALEŻENIA NIE NEUTRALIZUJAMY SOCZEWKI NAŁEŻY ZDŹYĆ JŹY NATYCHMIAZ I WYPLUKAĆ OBTARTE OKO DOZIŁK STERYLNYM WODY LUB SŹŁŹIZIOWCZYNŹ. Przed ponownym założeniem należy powtórzyć wcześniej omówioną procedurę dezynfekcji. Jeśli płukanie lub klucie utrzymuje się, należy natychmiast zwrócić się po pomoc do specjalisty przed ponownym przygotowaniem do noszenia soczewek kontaktowych.**

• **NIGDY NIE PROBUJ CZYSZCZYĆ LUB SPŁUKIWAĆ SOZEWKÓW KONTAKTOWYCH PŁYNEM AOSEPT<sup>®</sup> PLUS Z HYDRAGLYDE<sup>™</sup> TRZYWIAJĄC JE W DŁONIACH. KONTAKT Z NIE NEUTRALIZOWANYM PŁYNEM MOŻE SPOROBUJĄCZĄĆ ŁAGODNŹ, CZASOWŹ OZBARWIENIA (WYBIELENIŹ SKÓRY). Po nasadzeniu na kontakt zaleca się zawsze umyć ręce.**

• **DO CZYSZCZENIA SOZEWKÓW NIGDY NIE UŻYWAJMIYNIYMI ŚRODKAMI CZYSZCZĄCYMI, POZOSTAWIAJĄCYMI ICH POZOSTAŁOŚCI POWODUJĄ POWSTANIE PŁYNÓW. CO SKUTKOWIE PRZEPRECIWIENIEM POJEMNIKA I WYLEWANIEM SIĘ PŁYNEM NA ZEWNIŹZAR ODRZEPNŹAJ NIEUTRALIZACJŹ PŁYNŹ AOSEPT<sup>®</sup> PLUS Z HYDRAGLYDE<sup>™</sup>.**

• **Aby zachować skuteczność produktu:**

• UŻYWAJ TYLKO ODŁŹCZONEJ POJEMNIKA NA SOZEWKI AOCUP. NIE UŻYWAJ INNEGO NIESKOJEMNIKA NA SOZEWKI.

• Nie używaj innego płynu z dostarczonym pojemnikiem na soczewki.

• Zawsze używaj świeżego płynu AOSEPT<sup>®</sup> PLUS z HydrAGlyde<sup>™</sup> - nigdy nie używaj ponownie płynu w pojemniku na soczewki.

• NIGDY nie mieszaj ani nie mieszaj płynu AOSEPT<sup>®</sup> PLUS z HydrAGlyde<sup>™</sup> z jakimikolwiek płynem, ponieważ mogą pojawić się jego działanie.

• NIGDY nie przeszkadza płynu AOSEPT<sup>®</sup> PLUS z HydrAGlyde<sup>™</sup> do innego pojemnika.

• NIGDY NIE DOPUSZCZAJ DO KONTAKTU SOZEWKÓW KONTAKTOWYCH Z NIESTERYLNYMI PŁYNAMI (W TYM Z WODY Z KRAJIN I SŁŹIZIOWCZYNŹ). PONEWAŻ MOŻE NASTĄPIĆ ZANIECZYSZCZENIE MIKROBIOLOGICZNE, KTORŹ MOŻE PROMOWAĆ DO TRWAŁEGO USZKODZENIA OKA.

• W PRZYPADEK UPOJENIA NIEODSTRĘPIANEGO PŁYNEM AOSEPT<sup>®</sup> PLUS Z HYDRAGLYDE<sup>™</sup> należy natychmiast wyciągnąć doleci wody i niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

• Przed rozpoczęciem przyjmowania jakichkolwiek środków leczniczych w trakcie stosowania soczewek kontaktowych należy skonsultować się z lekarzem pierwszego kontaktu lub z lekarzem okulogistŹ.

Postępowanie zgodnie z zaleceniami specjalisty i wszystkim instrukcjami na opakowaniu, aby prawidłowo używać i dbać o swoje soczewki i produkty do pielęgnacji soczewek, także pojemnik na soczewki.

**ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:**

• Zawsze umyj, opłucz i wysusz ręce przed dotknięciem soczewek.

• Nie używaj płynu po upływie daty ważności.

• UMOŹLIWIŁO STWIERDZENIE NARAŻENIA: Nie używaj, jeśli bandaera zabezpieczająca wkładki zamknięcia jest uszkodzona lub nie ma jej wcale.

• Nie używaj, jeśli opakowanie lub butelka (opakowanie sterylne), bądź pojemnik na soczewki są uszkodzone.

• Dokładnie zamij kąpielnicę butelki po każdym użyciu.

• Po upływie 3 miesięcy od otwarcia butelki, całość płynu należy usunąć.

• Aby uniknąć zanieczyszczenia produktu, nigdy nie dotykaj końcówką zaparkowaną butelki do jakiejkolwiek powierzchni.

• Zawsze stosuj nowy pojemnik na soczewki AOCup dostarczony z każdŹ butelkŹ płynu AOSEPT<sup>®</sup> PLUS z HydrAGlyde<sup>™</sup>.

• Nie przechowuj w temperaturze powyżej 25<sup>o</sup>C + 25<sup>o</sup>C.

• Zawsze używaj płynu AOSEPT<sup>®</sup> PLUS z HydrAGlyde<sup>™</sup> w temperaturze pomiędzy 15<sup>o</sup>C i 25<sup>o</sup>C, ponieważ neutralizacja poniżej 15<sup>o</sup>C może trwać dłużej niż 6 godzin.

• Przechowuj z dala od pojemnika do pielęgnacji soczewek kontaktowych składowanej się z specjalistŹ.

**DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE:**

W przypadku wystąpienia uczucia dyskomfortu lub podrażnienia należy wyjąć soczewki z oczu, przetrzeć ich stonowanie i skonsultować się ze specjalistŹ.

**Zgłaszanie incydentów medycznych:**  
Wszelkie opłekte incydenty medyczne związane z użyciem tego wyrobu medycznego powinny być zgłaszane do Alcon Laboratories, Inc.

Należy skontaktować się z lokalnym biurom krajowym lub dystrybutorem Alcon. E-Mail: qa.complaints@alcon.com

Takie opłekte incydenty medyczne należy również zgłosić organom władzom lub do wyrobów medycznych w danym państwie członkowskim.

**DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE:**

Płyn AOSEPT<sup>®</sup> PLUS z HydrAGlyde<sup>™</sup>, sterylizowany metodŹ filtracji, dostępny jest w opakowaniach o pojemności 90 (tytuł) i 360 ml. Pojemnik na soczewki wraz z dyskiem neutralizującym AOCUP<sup>®</sup> jest dostarczany z każdŹ butelkŹ płynu AOSEPT<sup>®</sup> PLUS z HydrAGlyde<sup>™</sup>. Butelki i opakowania kartonowe są oznaczone numerem seryjnym i datŹ wyprodukowania.

**(STERE) A**

Sterylnizowane z użyciem asetycznych technik przetwarzania.

**DŹELNĚJŠI INFORMACJE O POJŹVANI PRŹIPRAVKU A BEZPEČNOSTNĚ**

**POKRYVIA. PROSIM DŹELNĚJŠI ICH PREČITÁTE A UCHOVÁTE PRE BUDUCE POUŽITIE. NESPRÁVNA STAROSTLIVOSŤ O KONTAKTNÉ SOZEVKY MOŻE SPŮSOBIT ZÁVAŽNÉ OČNÉ PROBLÉMY.**

**NÁZOV PRŹIPRAVKU:**

**AOSEPT<sup>®</sup> PLUS**

3% peroxid vodika

Čistiaci a dezinfekčný roztok

so zvlhčujúcou zvlhčujúcou HydrAGlyde<sup>™</sup>

Pre mäkké (hydrofilné) kontaktné šošovky (vrátane silikóno-hydrogelových šošoviek) a tvrdé (fluoro-silikonovo-akrylátové a silikonovo-akrylátové) kontaktné šošovky priepustné pre plyn.

**CHARAKTERISTIKA:**

System starostlivosti o kontaktné šošovky AOSEPT<sup>®</sup> PLUS so zvlhčujúcou zvlhčujúcou HydrAGlyde<sup>™</sup> sa skladá z čistiacieho a dezinfekčného roztoku AOSEPT<sup>®</sup> PLUS so zvlhčujúcou zvlhčujúcou HydrAGlyde<sup>™</sup> (pozri obr. 1) a puždu na kontaktné šošovky AOCup (pozri obr. 2).

Puždu na kontaktné šošovky AOCup obsahujŹe priehľadnú nádobku a pripojenú skrutkované viečko, držŹiky na šošovky (košičky) a opalke čistŹieho neutralizujúci systém AODISC<sup>®</sup>, ktorý služí ako katalyzátor. Pred použitím sa uistite, že je pripojený AODISC<sup>®</sup>, nevyhnutný pri procese neutralizácie peroxidu vodika. Roztok AOSEPT<sup>®</sup> PLUS so zvlhčujúcou zvlhčujúcou HydrAGlyde<sup>™</sup> je možné používať v puzdre, a puzdro AOCup.

• Otvorte košičku označenú „1” a v vyčistenú časť polozte vaše ľavé šošovky. Košičku zavrite, dajte na ťa, aby ste kontaktovali šošovky nepriepri.

• Rovnako spôsobom umiestnite pravú kontaktnú šošovku na vyčistenú časť košičky označenej „2”.

• Otvorte odklápacie viečko z fliašky s roztokom AOSEPT<sup>®</sup> PLUS so zvlhčujúcou zvlhčujúcou HydrAGlyde<sup>™</sup> a odskopajte na stranu.

• Dôkladne opláchnite šošovky umiestnené v košičku roztokom AOSEPT<sup>®</sup> PLUS so zvlhčujúcou zvlhčujúcou HydrAGlyde<sup>™</sup> po dobu 5 minút (pozri obrázok 3).

• Naplnite nádobku puždu roztokom AOSEPT<sup>®</sup> PLUS so zvlhčujúcou zvlhčujúcou HydrAGlyde<sup>™</sup> po plnlinu značku (rysunok, NIE NEPLNIJTE ANI NEVYŠTEJTE NEDOSTAČNÉ (pozri obr. 4).

• Viečko držte so šošovkami do nádoby a zabránenie puzrovanie vzduchu. Puzdro na šošovky AOCup neodkladne prelejte nádobkou buj puzry. NIE POTRZÁVAJTE NÁDOBKU OČI.

• Puzdro neotvárajte vzhladom (pozri obr. 5).

• Pokiaľ sa z otvoru viečka puzdra uvoľnia búblik, mohli dŹijť k tomu, že va zostal neneutralizovaný roztok AOSEPT<sup>®</sup> PLUS so zvlhčujúcou zvlhčujúcou HydrAGlyde<sup>™</sup>. Je potrebné puzdro vyprázdiť a opláchnuť vyliaty roztok fľytkou, hoto stalo puzdro AOCup. Dôkladne vypláchnite nádobku a košičku sterylím sôľ fizjologičnou roztokom. Ak dŹijde k rozliatiu, okamžite vyčistite papierošvými rukavicami. Dôkladne i umyte vaše ruky pred manipuláciou so šošovkami alebo pred dotýkaním sa ok. ZOPAKUJTE VŠETKY UVEDENÉ BEZPEČNOSTNÉ PROCESY.

• Šošovky ponešajte ponorené v roztoku po dobu minimálne 6 hodín (pozri obr.) alebo cez noc, kvôli neutralizácii roztoku.

• Po umytí, opláchnutí a vysušení rúk, kontaktné šošovky vyberte z košičky.

• Poďa vlastného pŹiadania, alebo doporučenia ošimho špecialistu, kontaktné šošovky po neutralizácii pred nasadením do oka opláchnite STERYLNYM FYZIOLOGIČNÝM ROZTOKOM. AOSEPT<sup>®</sup> PLUS so zvlhčujúcou zvlhčujúcou HydrAGlyde<sup>™</sup> nepoužívajte k opláchnutiu kontaktných šošoviek pred nasadením do oka.

• Všet šošovky si teraz pripravte na nasadenie.

• Použitý roztok vylite, vypláchnite nádobku a košičku sterylím fyzjologičnou roztokom – NEPOUŽÍVAJTE VODU Z VOD